



mediroyal 

Ortély jsou naše vášeň

NRX[®] STRAP KIT



NRX[®] je registrovaná ochranná známka společnosti Mediroyal Nordic AB, Švédsko

© Mediroyal Nordic AB, Švédsko 2022



NRX[®] STRAP KITS

NRX[®] Strap Kits jsou předpřipravené aplikace, vhodné ke konkrétnímu využití během několika minut. Jsou vyrobeny z NRX[®] Strap nebo NRX[®] Strap PLUS. Při aplikaci nabízejí širokou škálu možností přizpůsobení.



NRX1001 · NRX[®] Strap Kit – sada pro kladívkový prst

Předpřipravená aplikace na kladívkový prst. Skládá se z dvojité a jednoduché smyčky (použití podle potřeby). Dále z kotvící pásky, vedoucí přes nohu. Části aplikace se smyčkou pomáhají flektovat metatarzální kloub. Upevňují se přímo na kotvící pásku, která vede přes nohu. Součástí jsou suché zipy pro zajištění aplikace.

Indikace: Kladívkový prst

Univerzální velikost



NRX1002 · NRX[®] Strap Kit – sada pro Supinaci

Předpřipravenou sadu lze použít k podpoře supinace/pronace předloktí u neurologickým pacientů. Je připevněna kolem palce. Následně je vedena spirálovitě kolem předloktí vzhůru přes loketní kloub, aby kontrolovala a napomáhala rotaci radia/ulny. Obsahuje suché zipy pro zajištění aplikace.

Indikace: Asistovaná supinace nebo pronace u neurologických pacientů nebo při léčbě stavů po frakturách.

Univerzální velikost



NRX1003 · NRX[®] Strap Kit – sada pro Hallux Valgus

Tato předpřipravená sada se používá ke kontrolované abdukci palce u pacientů s dg. hallux valgus. Korekce postavení kloubu povede nejen k lepší svalové kontrole, ale může také pomoci při reaktivaci svalů pro stabilizaci kloubu a k uvolnění bolesti. Páska je připevněna přes palec nohy. Individuální napětí zajišťuje páska, která je uchycena přes kotník. Příčná oblouková páska se používá ke zpevnění aplikace. Přes aplikaci lze nosit ponožku, což umožňuje aktivní použití v dostatečně prostorných botách. Součástí sady jsou části suchých zipů pro zajištění aplikace.

Indikace: Hallux valgus

Univerzální velikost



NRX1004 · NRX® Strap Kit – sada pro abdukci palce

Tuto sadu lze použít k podpoře a stabilizaci palce v abdukci. Může být použita pro neurologické pacienty k prevenci nebo léčbě kontraktur adduktorů a/nebo může být použita jako funkční podpora CMC-1. Aplikace umožňuje pacientovi získat funkční postavení kloubu, nebrání úchopu berle a může dokonce tento úchop funkčně zlepšit. Součástí jsou suché zipy pro zajištění aplikace. .

Indikace: Problémy s CMC-1 kloubem palce, lehké addukční kontraktury.

Univerzální velikost



NRX1005 · NRX® Strap Kit – sada pro podporu rotace v kyčli

Tato sada je určena k použití u pacientů s patologickým postavením kyčle ve vnitřní nebo vnější rotaci. Pánevní páska a stehenní manžeta poskytují upevňovací body pro připevnění rotační části. U pacientů s problémy s kyčlí obvykle dochází ke zkrácení adduktoru kyčle, což vyžaduje několik terapeutických intervencí. Sadu lze použít jako diagnostický nástroj k vyhodnocení účinku na pacienta, nebo po manuální terapii k udržení konstantního dynamického protažení adduktoru kyčle. Vnější rotační páska také zajistí individuální tlak na svaly hýždí, které pomáhají extenzi kyčelního kloubu. Suché zipy na pánevním pásu a stehenní manžetě jsou na páskách našité. Jedna část suchého zipu je upevněna na rotačním popruhu a druhá je nastavitelná.

Indikace: Zkrácení adduktorů kyčle, zejména adduktor longus a brevis, problémy s extenzí v kyčli.

Univerzální velikost




NRX1006 · NRX® Strap Kit – sada pro Epicondylitis

Pro optimální splnění účelu je tato sada vyrobena z kombinace NRX® Strap a NRX® Strap PLUS. Hlavní část z NRX® Strap se snadno přizpůsobí a vytváří tak kotvu pro další vrstvu. Pro snadnější aplikaci rozdělena na dvě pásy. Zpevňující část je vyrobena z NRX® Strap PLUS a může být použita k poskytnutí většího protitahu a podpory extenzorových a flexorových šlach. Součástí je také podložka pro zajištění větší podpory, kterou lze umístit na základní pásku z NRX® Strap (pod vyztužení z NRX® Strap PLUS). Základní pásku i vyztuž lze upravit zkrácením délky pásek.

Indikace: Laterální nebo mediální epikondylitida

Univerzální velikost

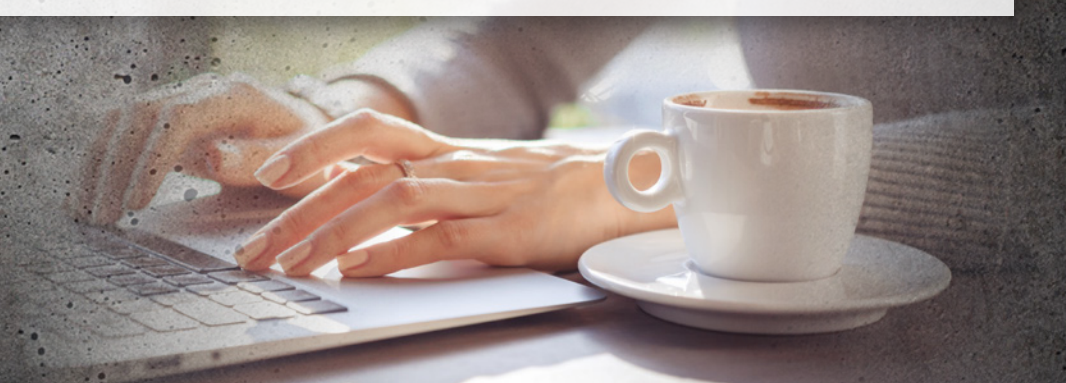



NRX® Strap Kit – Twin Bandages pro palec a prsty

Twin bandages mohou být využity pro zahájení mobilizace po poranění prstu s pomocí přilehlého prstu, který poskytuje podporu. Lze je také použít ke znehybnění prstů na ruce a nohou po výronech. Páska z NRX® Strap má na vnitřní straně třecí povrch, který zabraňuje klouzání po kůži.

NRX® Strap Kit Twin Bandages je k dispozici ve dvou variantách: NRX® Strap s větší flexibilitou a NRX® Strap PLUS s větší pevností. Použití pásky NRX® Strap PLUS profimálně vám umožňuje zvýšit funkční stabilitu a podporu MCP oproti NRX® Strap umístěný distálně od PIP kloubu. Twin bandages mají na jednom z konců zatavený suchý zip. Druhý konec lze snadno ustříhnout pro přizpůsobení délky.

Indikace: Zlomeniny, natažení nebo pohmoždění prstů na rukou nebo nohou, hypermobilita nebo k preventivnímu použití při sportu.

K dispozici v:

Šířka 15 mm, NRX® Strap kvalita

NRX1007-06 NRX® Strap 15 mm široký · 6-bal

NRX1007-30 NRX® Strap 15 mm široký · 30-bal

Šířka 15 mm, NRX® Strap PLUS kvalita

NRX1008-06 NRX® Strap PLUS 15 mm široký · 6-bal

NRX1008-30 NRX® Strap PLUS 15 mm široký · 30-bal

Šířka 30 mm, NRX® Strap kvalita

NRX1009-06 NRX® Strap 30 mm široký · 6-bal

NRX1009-30 NRX® Strap 30 mm široký · 30-bal

Ortély jsou naše vášně



mediroyal

Mediroyal Nordic AB
Box 7052 · Staffans väg 6B · SE-192 07 Sollentuna · Sweden
info@mediroyal.se · www.mediroyal.se

www.vajer.se · 26087DR · CZ